

 Fachlabor für Kieferorthopädie  
GmbH & Co. KG  
Berner Straße 23  
60437 Frankfurt  
Tel.: +49 (0)69 - 71 91 00 0

Über der Nonnenwiese 7  
99428 Weimar  
Tel.: +49 (0)3643 - 80 80 0  
info@harmonieschiene.de  
www.harmonieschiene.de

 ORTHOS AG  
Rathausstrasse 14  
CH-6341 Baar  
Tel.: +41 (0)41 - 500 64 88  
info@harmonieschiene.ch  
harmonieschiene.ch

 ORTHOS Austria GmbH  
Am Rosendorn 17 A  
A-2345 Brunn am Gebirge  
Tel.: +43 (0)2236 - 38 42 32  
info@harmonieschiene.at  
harmonieschiene.at

Firmenbuch-Nr. FN 401032d  
Landesgericht Wiener Neustadt  
UID-Nr. ATU 68119047

*Gerade Zähne lachen schöner*

- Frühbehandlung
- Klassische Kfo
- Sport-Mundschutz
- HarmonieSchiene
- Anti-Schnarchgeräte
- Präprothetische Kfo
- Seminare für Zahnärzte

...machen wir übrigens auch!

HS-RR\_09-2020

Der RotkäppchenRetainer<sup>®</sup> von ORTHOS




*Retainer kleben*

*Keine Angst vorm bösen Wolf*




# Gerade Zähne brauchen Halt

Mit dem **RotkäppchenRetainer<sup>®</sup>** von ORTHOS geht das ganz einfach!

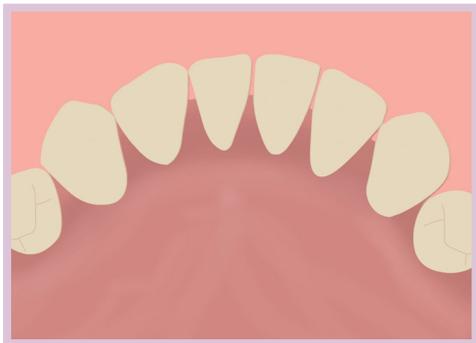


## Toll - schöne, gerade Zähne!

Die Behandlung mit der HarmonieSchiene<sup>®</sup> ist erfolgreich beendet. Danach kommt der RotkäppchenRetainer<sup>®</sup> zum Einsatz, damit das Ergebnis so schön bleibt.

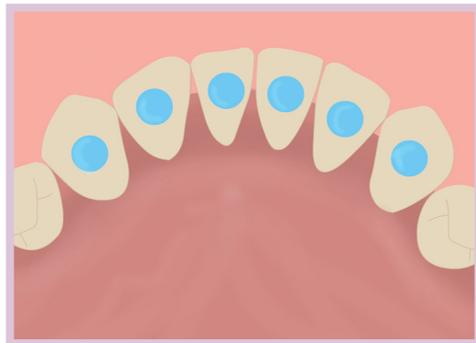


## 1. Schritt:

Das Ätzelgel sollte mindestens 90 Sekunden einwirken.

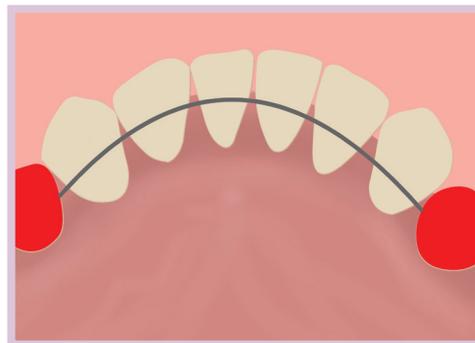


## 2. Schritt:

Der RotkäppchenRetainer<sup>®</sup> wird einfach aufgesetzt und passt perfekt. Eine dritte Hand ist nicht erforderlich.

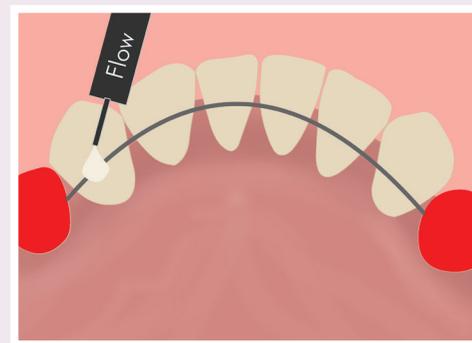


## 3. Schritt:

Nehmen Sie für das Bonding und Kleben einen dünnfließenden Composite, mit dem Sie gute Erfahrung haben.

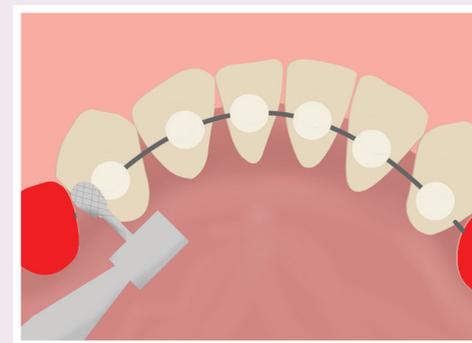

## 4. Schritt:

Nach dem Bonding wird z.B. mit einem Diamanten der Draht distal des Eckzahns durchtrennt und anschließend poliert.

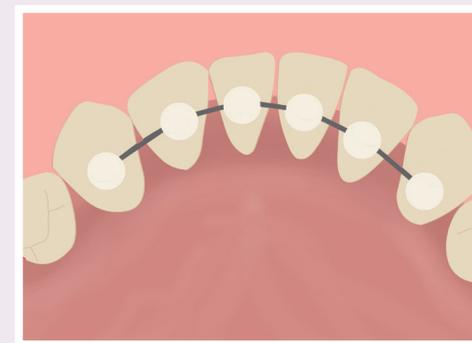

## Fertig: Sicherer Halt!

Jetzt haben Sie einen Patienten glücklich gemacht.

